

PO#1SB002722_GBF-1716-B12_PN15287_说明书


印色：单黑

材质：105G铜版纸

尺寸：143*210mm

备注：无矿物油

BODY CONNECT

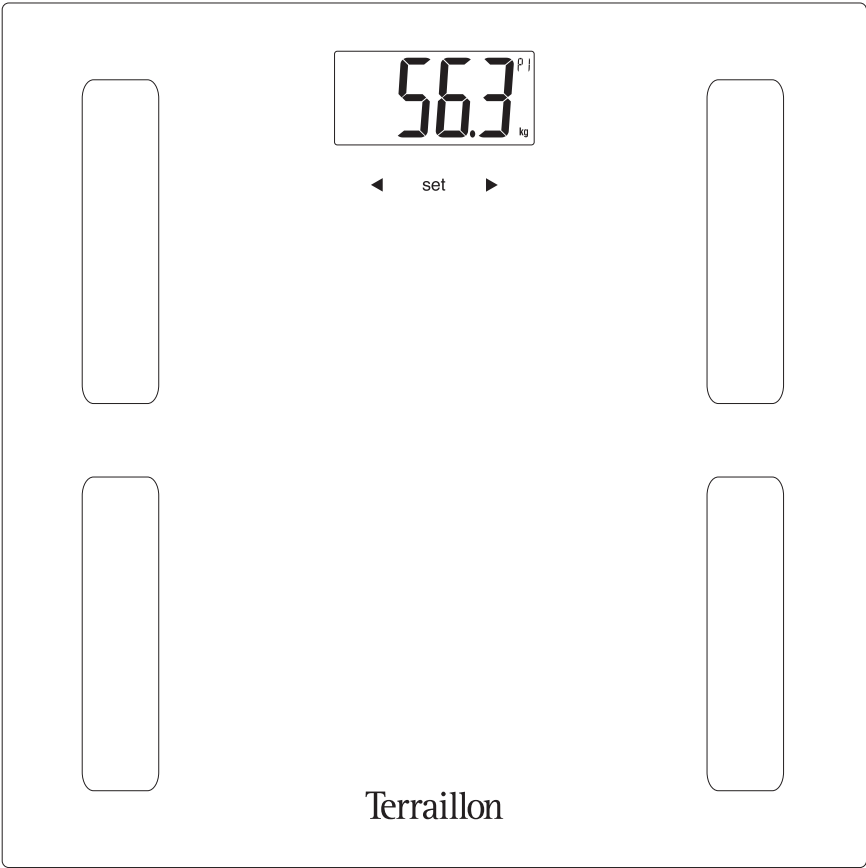

USER MANUAL | GUIDE D'UTILISATION

Terraillon®

www.terraillon.com

Made for / Compatibilité



iOS 8.0 & +



Android 4.3 & +
Smartphone only / No tablet



iPhone is registered trademark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Terraillon SAS déclare que COACH CONNECT est conforme aux réglementations essentielles en matière de santé et de sécurité. Ce produit répond aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive européenne RED 2014/53/UE. La déclaration de conformité intégrale est disponible sur <https://terraillonhelp.zendesk.com/hc/fr/categories/360000322733-D%C3%A9clarations-de-conformit%C3%A9>

COACH CONNECT



EN	TERRAILLON CONNECTED BODY COMPOSITION ANALYZER INSTRUCTION MANUAL	4
FR	IMPÉDANCEMÈTRE CONNECTÉ TERRAILLON NOTICE D'UTILISATION	6
NL	TERRAILLON LICHAAMSVETWEEGSCHAAL HANDLEIDING	8
IT	BILANCIA MASSA GRASSA TERRAILLON MANUALE DI ISTRUZIONI	10
ES	BÁSCULA DE MASA GRASA DE TERRAILLON MANUAL DE INSTRUCCIONES	12
DE	TERRAILLON KÖRPERFETTANALYSEWAAGE BEDIENUNGSANLEITUNG	14
PT	BALANÇA DE MASSA GORDA TERRAILLON MANUAL DE INSTRUÇÕES	16
EL	ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ TERRAILLON ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	18
SV	TERRAILLON ANSLUTNINGSBAR KROPPSSAMMANSÄTTNINGSANALYSATOR INSTRUKTIONSBOK	20
NO	TERRAILLON TILKOBLET ANALYSEAPPARAT FOR KROPPSSAMMENSETNING BRUKSANVISNING	22
FI	TERRAILLON YHDISTETTÄVÄ KEHONKOOSTUMUKSEN ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJE	24
DA	TILSLUTTET TERRAILLON-ANALYSATOR FOR KROPSSAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING	26

Nous vous remercions d'avoir choisi l'impédancemètre COACH CONNECT de Terraillon.



Ne pas utiliser ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical • Aucune des informations fournies par cet appareil ne vise à soigner, traiter ou empêcher une maladie.

APERÇU

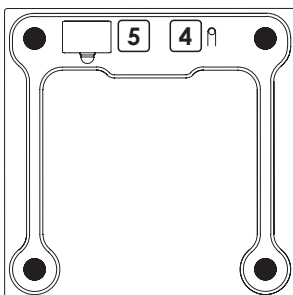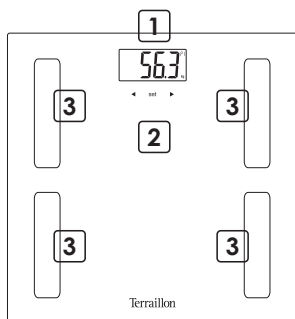

- 1** Écran LCD
- 2** Sélection du profil
- 3** Électrodes
- 4** Bouton synchronisation Bluetooth et unités de mesures
- 5** Compartiment à piles

PREMIÈRE INSTALLATION

- Insérez les piles (3xAAA).
- Pour installer votre pèse-personne, veuillez vous munir de votre smartphone.
- Téléchargez l'application Wellness Coach - MyHealth, puis l'ouvrir.



- Suivez les instructions qui apparaissent sur votre smartphone. Veillez à bien renseigner toutes les informations demandées.
- Votre smartphone doit être à proximité du pèse-personne tout au long de l'installation.
- Il est important de relier votre compte à un numéro de profil pour la reconnaissance automatique lors de la pesée. Vous pouvez synchroniser le pèse-personne avec 8 Smartphones maximum.
Avant votre première pesée, veuillez sélectionner votre numéro de profil sur le pèse-personne.

Lorsque l'utilisateur n'est pas reconnu, deux profils sont affichés (ici P1 et P8). Appuyez sur ◀ pour sélectionner le profil de gauche, ▶ pour celui de droite.



En cas de difficultés ou pour plus d'informations, retrouvez notre centre d'aide en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez également contacter notre Service Après Vente : serviceconsommateurs@terraillon.fr



COMMENCER LES MESURES

A

1. Vous devez être pieds nus pour pouvoir procéder à l'analyse de vos masses corporelles.
2. Ouvrez l'application MyHealth.
3. Montez sur votre pèse-personne. Restez immobile. Maintenez le contact avec les électrodes jusqu'à ce que la barre de progression suivante disparaisse de l'écran.
4. Si l'application n'est pas ouverte, les données seront sauvegardées dans le pèse-personne.
5. Le symbole  s'affichera alors à l'écran.
6. Pour transmettre les données, ouvrez l'application sur votre smartphone, sélectionnez votre profil sur la balance puis appuyez sur SET. Sinon, elles seront transmises à la prochaine pesée si vous suivez l'étape A.



Veillez à toujours vous peser sur une surface dure et plane.

MAINTENANCE

Utilisez un chiffon humide uniquement. N'utilisez JAMAIS de détergents ou d'autres produits chimiques.

GARANTIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est garanti 2 ans contre tout défaut matériel et de fabrication. Au cours de cette période, ces défauts seront réparés gratuitement (une preuve d'achat doit être présentée si la balance est sous garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages provenant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou de négligence. Si vous avez une réclamation, adressez-vous d'abord au magasin où vous avez acheté votre balance.



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les recycler dans les installations prévues à cet effet. Contacter l'administration locale ou le détaillant pour tout conseil de recyclage.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

P.I.R.E: 4.19 dBm.

Terraillon SAS France & Headquarters

1, rue Ernest Gouin
78290 Croissy-sur-Seine – France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

Terraillon UK Limited

16 Great Queen Street - Covent Garden
LONDON
WC2B 5AH
support.uk@terraillon.com

Terraillon Asia Pacific Ltd

4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay – Hong Kong
Tel: +852 (0)2960 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA

contact@terraillon.fr

Terraillon®
www.terraillon.com